


REF: 2798

(HU) Használati útmutató

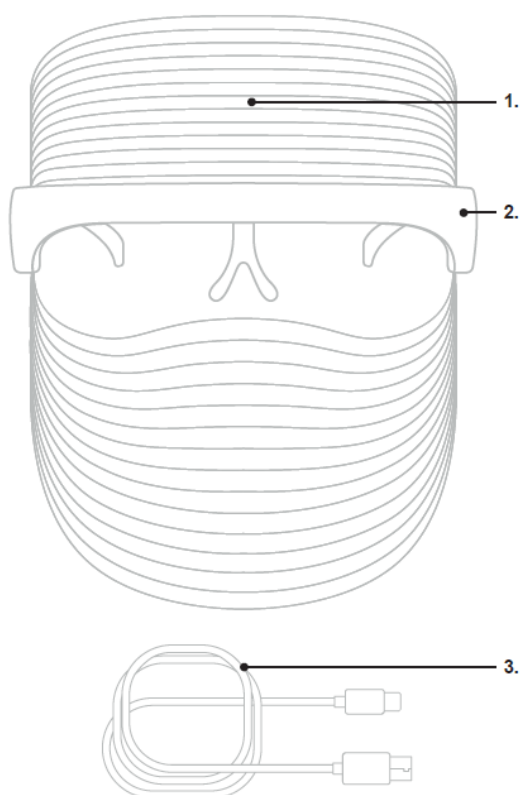

(HU) LEÍRÁS

1. Maszk
2. Be / Ki / Mód gomb
3. USB töltőkábel

(HU) LED ARC MASZK

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

- Ezek az utasítások rendkívül fontosak, kérjük.
- Ezek az utasítások rendkívül fontosak, kérjük olvassa el ezt a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg későbbi felhasználásra.
- A JOCCA nem vállal felelősséget a termék nem megfelelő használatából vagy a kézikönyvben nem leírt egyéb használatból eredő következményekért.
- A termék első használata előtt csomagolja ki, és ellenőrizze, hogy tökéletes állapotban van-e.

Ha nem, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba a JOCCA-val, mivel a garancia fedezi az eredeti hibákat vagy gyártási hibákat.

- Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket kültéren. Ne tegye ki időjárási viszonyoknak, például esőnek, hónak, napfénynek stb., amelyek befolyásolhatják a működését.
- Ez a készülék 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek által használható, amennyiben felügyelet alatt állnak, vagy megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a használatból járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha legalább 8 évesek és felügyelet alatt állnak.
- Tartsa a terméket és a tápkábelt távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A gyermekeket felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játszanak a termékkel.
- Ha használat közben le kell tennie a készüléket, mindig kapcsolja ki, és helyezze stabil, vízszintes és sima felületre.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a kábel és a csatlakozó tökéletes állapotban van-e. Ellenőrizze továbbá, hogy a terméken feltüntetett feszültség megfelel-e az Ön elektromos hálózatának.
- Ha a termék leesett, vagy víz vagy más folyadék ömlött rá, ne használja, és ne próbálja megjavítani. Lépjen kapcsolatba a JOCCA műszaki szervizzel.
- Ha azt észleli, hogy az USB töltőkábel sérült vagy vízzel, illetve más folyadékkal átitatott, ne használja a készüléket, és ne próbálja meg kicserélni. Lépjen kapcsolatba a JOCCA hivatalos műszaki szervizzel, amely biztonságosan kicseréli azt.
- Ne merítse a terméket vagy annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba.
- Mindig a JOCCA tartozékait és pótalkatrészeit használja a biztonság és a készülék legjobb teljesítménye érdekében.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy lábbal, illetve mezítláb.
- Soha ne hagyja a készülék kábelét lógva vagy forró részekkel érintkezve.
- Ne helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan az beleeshet a fürdőkádba vagy mosdóba.
- Ne használja a készüléket nedves helyiségekben, illetve fürdőkád, zuhanyzó, kézmosó vagy más vízzel teli edények közelében.
- Ne használja a készüléket fürdés közben.
- Ez a készülék nem ajánlott olyan személyek számára, akik arcműtéten estek át, szubkután fémimplantátummal rendelkeznek, vagy várandósak.
- Érzékeny bőr esetén nem ajánlott a készülék mindennapos használata.

AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne feledje, hogy az elemeket speciális gyűjtőkonténerekbe kell helyezni.
- Ha ki szeretné dobni a készüléket, előtte mindig távolítsa el az elemeket.
- Soha ne helyezze az elemtartót tűz vagy hőforrás közelébe.
- Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye a vezérlőegységet napra.
- Ha az akkumulátor szivárog, soha ne érintse meg közvetlenül kézzel.
- Az akkumulátort csak akkor szabad eltávolítani, ha a készülék ki van kapcsolva és le van választva a hálózatról.
- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből a biztonságos ártalmatlanítás érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

- A készülék első használata előtt teljesen töltsse fel. Soha ne használja a készüléket töltés közben.
- A maszk töltéséhez csatlakoztassa azt egy USB porthoz a mellékelt kábel segítségével. Töltés közben piros fény világít. Amikor a maszk teljesen feltöltött, a fény pirosról kékre vált.
- Készítse elő a bőrét a maszk használata előtt. Tisztítsa meg az arcát, és vigyen fel hidratáló termékeket.
- Nyomja meg a gombot a maszk bekapcsolásához.
- Az LED maszk nem invazív, fényalapú technológiát alkalmaz az általános bőrállapot javítására. Különböző hullámhosszúságú fényt bocsát ki, hogy kiegészítse a bőrápolási rutint és elősegítse a ragyogó megjelenést.
- A maszk 7 fényforrással rendelkezik, amelyek 7 különböző arckezelési módnak felelnek meg:
 - **Piros fény:** javítja a bőr megjelenését és textúráját, valamint elősegíti a természetes kollagéntermelést.
 - **Zöld fény:** elősegíti az egyensúlyt a nyugodt és friss megjelenés érdekében.
 - **Lila fény:** segít kiegyenlíteni a bőrtónust.
 - **Fukszia fény:** kiegészíti az arckezelési rutinokat, amelyek a bőr textúrájának finomítására összpontosítanak.
 - **Kék fény:** támogatja a bőr természetes vitalitását és elősegíti a megújult megjelenést.
 - **Narancssárga fény:** javítja a ragyogást és simítja a bőrt.
 - **Rózsaszín fény:** javítja a finom vonalakat és feszesíti a bőrt, támogatva a bőr természetes megújulási folyamatát.
- Alapértelmezés szerint először a piros fény világít.

- A mód megváltoztatásához nyomja meg a gombot, amíg a kívánt módot kiválasztja.
- Helyezze az arcmaszkot az arcára, és viselje 10–20 percig.
- A maszk kikapcsolásához tartsa lenyomva a gombot néhány másodpercig.
- A nagyobb kényelem érdekében ajánlott csukott szemmel használni a maszkot.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- A készülék tisztítása előtt győződjön meg róla, hogy ki van kapcsolva.
- Minden használat után tisztítsa meg a maszkot száraz ruhával.
- Ne használjon súrolószereket vagy olyan termékeket, amelyek károsíthatják a készüléket.
- SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET ÉS A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.
- Tárolja a készüléket száraz és biztonságos helyen, gyermekektől elzárva.

MŰSZAKI ADATOK

Töltés: 5V  1A (USB-n keresztül)

Akkumulátor: 3,7V lítium-polimer

Kapacitás: 250mAh



Ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC, a 2011/65/EU és a 2015/863/EU ROHS irányelveknek.

HOGYAN TÁVOLÍTSD EL AZ AKKUMULÁTORT

- Ha a termék akkumulátort tartalmaz, azt a termék kidobása előtt el kell távolítani az alábbi lépések szerint:
- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt eltávolítja a készülékből.
- A készüléket le kell választani az áramforrásról az akkumulátor eltávolításakor.
- Nyissa ki a készülék burkolatát, előzőleg távolítsa el a rögzítőcsavarokat csavarhúzó segítségével.
- Azonosítsa az akkumulátort, és vágja el a kábeleit (piros és fekete). A rövidzárlat kockázatának elkerülése érdekében a lehetséges maradék töltés miatt először a piros kábelt vágja el, és szigetelőszalaggal fedje le a vezető részt. Ezután ugyanígy vágja el a fekete kábelt.
- Biztonságosan távolítsa el az akkumulátort a helyéről.
- Ne feledje, hogy az akkumulátorokat külön, engedélyezett gyűjtőedényekben kell kidobni.