


JOCCA

WELLNESS

Ref: 2399

Termékleírás

- 1 Főtest
- 2 Sebességjelző fény
- 3 Be/Ki gomb
- 4 Töltőcsatlakozó
- 5 Gömbfej
- 6 Lövedékfej
- 7 Lapos fej
- 8 Villa fej
- 9 USB töltőkábel

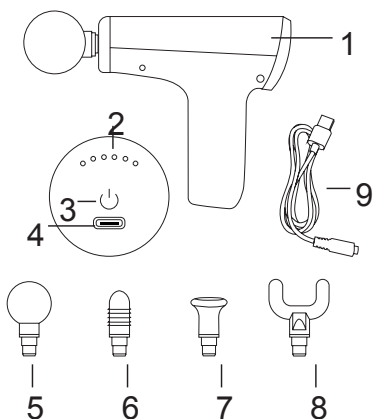

MASSZÁZSPISZTOLY BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Ezek az utasítások rendkívül fontosak. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a készülék használata előtt, és őrizze meg későbbi felhasználásra. A JOCCA nem vállal felelősséget a termék helytelen használatából vagy a kézikönyvben nem ismertetett egyéb használatból eredő következményekért. A termék első használata előtt csomagolja ki, és ellenőrizze, hogy tökéletes állapotban van-e. Ha nem, ne használja a terméket, és lépjen kapcsolatba a JOCCA-val, mivel a garancia kiterjed a gyártási hibákra vagy az eredeti sérülésekre. Ez a termék kizárólag háztartási használatra készült. Ne használja a készüléket szabadban. Ne tegye ki időjárási körülményeknek, például esőnek, hónak, napsugárzásnak stb., amelyek ronthatják a működését. A készüléket 8 éves kortól gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal vagy tudással nem rendelkező személyek is használhatják, ha felügyelet mellett vagy megfelelő és biztonságos használatra vonatkozó utasítással látták el őket, és értik a veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha legalább 8 évesek és felügyelet alatt állnak.

Tartsa a terméket és a tápkábelt 8 év alatti gyermekektől távol. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani annak érdekében, hogy ne játsszanak a termékkel. Ha használat közben le kell tennie a készüléket, mindig kapcsolja ki, és helyezze stabil, vízszintes és sima felületre. A készülék hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kábel és a csatlakozó hibátlan állapotban van-e. Ellenőrizze továbbá, hogy a készüléken feltüntetett feszültség megegyezik-e az Ön villamos hálózatának feszültségével. Ha a termék leesett, vagy víz vagy más folyadék került bele, ne használja, és ne próbálja megjavítani. Lépjen kapcsolatba a JOCCA műszaki szervizével. Ha észleli, hogy a tápkábel, a csatlakozó vagy az adapter sérült, illetve víz vagy más folyadék érte, ne használja a készüléket, és ne próbálja meg kicserélni a kábelt, a csatlakozót vagy az adaptert. Forduljon közvetlenül a JOCCA hivatalos műszaki szervizéhez, amely megfelelően kicseréli azt a veszélyek elkerülése érdekében. Ne merítse a készüléket vagy annak bármely részét vízbe vagy más folyadékba. Mindig a JOCCA által gyártott tartozékokat és pótalkatrészeket használja a biztonság és a készülék legjobb teljesítménye érdekében. Ne használja a készüléket nedves kézzel vagy lábbal, illetve mezítláb.

-Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. Használat előtt konzultáljon orvosával, ha az alábbi helyzetek valamelyike fennáll:

Terhes, vagy nemrég szült.

Szívbetegségben szenved, illetve pacemakert használ.

Törése, csonttritkulása, vagy bármilyen izom-, gerinc- vagy ízületi betegsége van. Rosszindulatú daganattal küzd.

A masszázspisztolyt tiszta, száraz bőrön használja. Ajánlott ruhán keresztül alkalmazni, enyhe nyomással és folyamatos mozgatással, körülbelül 60 másodpercig minden egyes területen. A masszázspisztolyt kizárólag a test puha szövetein használja, fájdalom vagy kellemetlenség nélkül. Kerülje a nyak feletti részeket, valamint azokat a területeket, ahol kevés az izom és a csont közel van. Ne használja a készüléket, ha zúzódása van, vagy ha fájdalmat, illetve kellemetlenséget érez. Ne akadályozza a szellőzőnyílásokat, és ne helyezzen tárgyakat azokba. Ne közelítse ujjait, haját vagy más testrészeit a tengelyhez, illetve a masszázsfej hátsó részéhez, hogy elkerülje a becsípődést.



-AKKUMULÁTOR FIGYELMEZTETÉSEK:

Ne feledje, hogy az elemeket/akkumulátorokat a gyűjtésükre szolgáló speciális konténerekbe kell helyezni. Ha a készüléket ki akarja dobni, mindig távolítsa el belőle az elemeket/akkumulátort előtte. Soha ne tegye az elemtartót tűz vagy hőforrás közelébe. Ne dobja az elemeket tűzbe, és ne tegye a vezérlőegységet közvetlen napfényre. Ha az akkumulátor szivárog, soha ne érintse meg közvetlenül kézzel. Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből a biztonságos ártalmatlanítás érdekében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A készülék első használata előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

Helyezze a kívánt fejet a masszázspisztolyba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához.

Alapértelmezés szerint a masszázspisztoly az első sebességfokozaton indul, és az első jelzőfény világít.

A készülék 6 sebességfokozattal rendelkezik.

A sebesség megváltoztatásához nyomja meg a BE/KI gombot, amíg el nem éri a kívánt fokozatot. A világító fény helyzete jelzi, hogy a masszázspisztoly melyik sebességen működik.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a BE/KI gombot 3 másodpercig.

A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van ellátva, ezért 15 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.


Masszázsfejek és funkcióik:

A masszázspisztoly 4 különböző formájú és funkciójú fejet tartalmaz:

	GÖMBFEJ Nagy izomcsoportokhoz, például hát, láb, fenék, mellizom stb. használható.
	GOLYÓS FEJ A mély izompontok elérésére vagy a feszültség enyhítésére olyan területeken, mint a tenyér vagy a talp.
	LAPOS FEJ A nagy izomterületek ellazítására és tónusosítására..
	VILLA FEJ Csontos területek körüli masszírozásra és stimulálásra, például a nyak, a gerinc környéke és az Achilles-ín.

A fejek cseréje előtt győződjön meg róla, hogy a masszázspisztoly ki van kapcsolva.

A fej cseréjéhez egyszerűen húzza le a fejet a készülék testéről, majd helyezze be a kívánt fejet az alábbi ábrán látható módon.

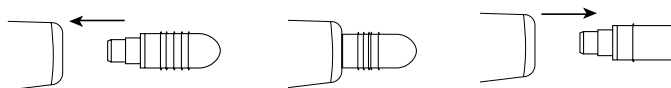

TÖLTÉS

A masszázspisztoly akkumulátorának töltéséhez csatlakoztassa a kábel egyik végét a töltőporthoz, a másik végét pedig egy 5V DC USB adapterhez (nem tartozék). Az akkumulátor teljesen feltöltődött, amikor mind a hat kék jelzőfény világít. A töltési idő körülbelül 6 óra.

Ne használja a masszázspisztolyt töltés közben. Mindig válassza le a hálózatról a használat előtt.

TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva és le van választva a hálózatról.

A készülék külső részét tisztítsa nedves ruhával vagy szivaccsal, majd törölje száraz ruhával.

Ne használjon súroló hatású tisztítószeret vagy olyan termékeket, amelyek károsíthatják a készüléket.
SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET ÉS A TÁPKÁBELT VÍZBE VAGY MÁS FOLYADÉKBA.

Tárolja a készüléket száraz és biztonságos helyen.

MŰSZAKI ADATOK

Charge: 5V ~~4A~~ (by USB)

7.4V ~~4.1V~~ (Li-ion)

Lithium battery 1800 mAh



Ez a termék megfelel a következő irányelveknek:
 2014/30/EU EMC, 2011/65/EU és 2015/863/EU ROHS.

TERMÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁS – KÖRNYEZET



Ne dobja el ezt a terméket a használati ideje végén.
 Vigye el egy kijelölt hulladékgyűjtő pontra (a 2012/19/
 EU WEEE irányelvnek megfelelően).

HOGYAN TÁVOLÍTHATÓ EL AZ AKKUMULÁTOR:

Ha a termék tartalmaz akkumulátort, azt a készülék ártalmatlanítása előtt az alábbi lépések szerint el kell távolítani:

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült, mielőtt eltávolítja a készülékből.

Az akkumulátor eltávolításakor a készüléket ki kell kapcsolni, és le kell választani az elektromos hálózatról.

Nyissa ki a készülék burkolatát, miután előzőleg eltávolította a rögzítőcsavarokat egy csavarhúzó segítségével.

Azonosítsa az akkumulátort, és vágja el a vezetékeit (piros és fekete). A rövidzárlat kockázatának elkerülése érdekében, amely az akkumulátor esetleges maradék töltéséből adódhat, először a piros vezetékét vágja el, és szigetelőszalaggal fedje le a vezető részt. Ezután ugyanígy vágja el a fekete vezetékét. Biztonságosan távolítsa el az akkumulátort a helyéről.

Ne feledje, hogy az akkumulátorokat speciális, engedélyezett gyűjtőkonténerekben kell elhelyezni.