


Használati utasítás

Fig. A

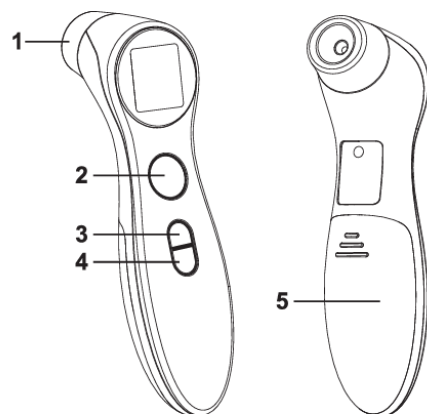

Általános biztonsági tudnivalók

Az első használat előtt

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék telepítésére, használatára és karbantartására vonatkozóan, valamint segítséget nyújt a balesetek és az esetleges károk elkerülésében.

Kicsomagolás után ellenőrizze, hogy a készülék sértetlen és hiánytalan állapotban van-e, különös tekintettel a hálózati tápkábelre.

A csomagolóanyagokat (például műanyag zacskók, polisztirol stb.) tartsa gyermekektől elzárva, mivel azok veszélyforrást jelenthetnek. A csomagolóanyagokat ne a háztartási hulladékba dobja, hanem a helyi hulladékgyűjtő vagy újrahasznosító ponton adja le. Szükség esetén forduljon a helyi hulladékgazdálkodási szolgáltatóhoz.

A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja. Minden ettől eltérő felhasználás nem rendeltetésszerűnek minősül, és veszélyes lehet. A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő, helytelen vagy gondatlan használatból eredő károkért.

A túlmelegedés elkerülése érdekében használat előtt a hálózati kábelt teljes hosszában tekerje le. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

Az áramütés elkerülése érdekében:

- Ne merítse a készüléket, a hálózati kábelt vagy a csatlakozódugót vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel vagy lábbal.
- Ne használja a készüléket mezítláb.

Ne tegye ki a készüléket esőnek, hónak, jégesőnek, erős szélnek vagy egyéb időjárási hatásoknak.

Ne használja a készüléket robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagok, gázok, nyílt láng vagy hőforrás közelében.

Gyermekek, fogyatékkal élő személyek, illetve megfelelő tapasztalattal vagy műszaki ismeretekkel nem rendelkező személyek kizárólag megfelelő felügyelet mellett használhatják a készüléket. A gyermekeket mindig felügyelni kell, és gondoskodni kell arról, hogy ne játsszanak a készülékkel.

Ha a készüléket véglegesen kivonja a használatból, először húzza ki a hálózati csatlakozót, majd vágja le a tápkábelt, hogy a készülék ne legyen többé használható. A veszélyt jelentő alkatrészeket is tegye ártalmatlanná, különösen a gyermekek védelme érdekében.

Bevezetés

Ez az infravörös hőmérő kifejezetten a homlokhőmérséklet biztonságos mérésére készült.

A készülék a homlok által kibocsátott infravörös sugárzás intenzitásának érzékelésével méri a testhőmérsékletet. Az érzékelt hőmennyiséget hőmérsékleti értékke alakítja, amely az LCD-kijelzőn jelenik meg.

A hőmérő az emberi testhőmérséklet időszakos mérésére szolgál a homlok bőrfelületén keresztül, és minden korosztály számára használható.

Figyelmeztetések

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót.

A készülék használatának nincs életkori korlátozása.

A készülék kizárólag otthoni használatra készült.

A készülék használata nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, diagnózist vagy kezelést.

A készüléket és az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják vagy játsszanak a készülékkel, mivel annak apró alkatrészei lenyelhetők.

Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

Ne módosítsa, ne szerelje szét, és ne alakítsa át a készüléket semmilyen módon.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek (–25 °C alatt vagy +55 °C felett), illetve 95%-nál magasabb relatív páratartalomnak.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.

A készülék részei (A ábra)

1. Infravörös érzékelő
2. **START** (Indítás) gomb
3. ◀ gomb
4. ▶ gomb
5. Elemtartó fedél

Az LCD-kijelző ismertetése (B ábra)

(Lásd a B ábrát.)

Az elemek behelyezése és cseréje

A hőmérő 2 db AAA típusú alkáli elemmel működik (nem tartozék).

Az első használat előtt csúsztassa lefelé az elemtartó fedelét, majd helyezze be az elemeket az elemtartóban jelölt polaritásnak (+/–) megfelelően. Ezután helyezze vissza az elemtartó fedelét.

Ha a kijelzőn megjelenik a lemerült elem jelzése, az elemeket a fenti módon cserélje ki.

A dátum és az idő beállítása

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a ▶ gombot körülbelül 3 másodpercig.

1. A **START** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt időformátumot (12 vagy 24 óra).
2. Amikor a kívánt formátum megjelenik a kijelzőn, nyomja meg a ▶ gombot. Az órák villogni kezdenek.
3. A **START** gombbal állítsa be az órát, majd a ▶ gombbal erősítse meg.
4. Nyomja meg ismét a ▶ gombot. A percek villognak.
5. A **START** gombbal állítsa be a perceket, majd a ▶ gombbal erősítse meg.
6. Nyomja meg ismét a ▶ gombot. Az év villogni kezd.
7. A **START** gombbal állítsa be az évet, majd nyomja meg a ▶ gombot a hónap beállításához.
8. A **START** gombbal válassza ki a hónapot, majd nyomja meg ismét a ▶ gombot a nap beállításához.
9. A **START** gombbal állítsa be a napot.
10. A ▶ gomb utolsó megnyomásával mentse a beállításokat, és lépjen ki a dátum- és időbeállítási módból.

A mértékegység beállítása

A hőmérő Celsius-fokban (°C) és Fahrenheit-fokban (°F) egyaránt képes mérni.

A mértékegység kiválasztásához:

1. Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a **START** gombot körülbelül 3 másodpercig, amíg a mértékegység meg nem jelenik a kijelzőn.
2. A **START** gomb ismételt megnyomásával válassza ki a kívánt mértékegységet (°C vagy °F).
3. A beállítás mentéséhez és a menüből való kilépéshez nyomja meg a ▶ gombot.

Tanácsok a testhőmérséklet helyes méréséhez

A lehető legpontosabb mérési eredmény érdekében vegye figyelembe az alábbiakat:

- Ismerje meg a mérendő személy normál testhőmérsékletét egészséges állapotban. Ez segít a láz pontos megállapításában.
- Testhőmérséklet-mérés előtt ajánlott legalább 30 percig zárt helyiségben tartózkodni.
- **Fontos:** A hőmérőnek és a mérendő személynek a mérés előtt legalább 10 percig ugyanabban a helyiségben kell tartózkodnia, azonos környezeti hőmérsékleten.
- A mérés előtt lehetőleg ne fogyasszon ételt vagy italt, és kerülje a forró fürdőt, zuhanyzást vagy egyéb hőhatásokat.
- A mérés előtt legalább 10 perccel távolítsa el minden olyan tárgyat a homlokról, amely befolyásolhatja a mérést (például haját, hajpántot, sapkát vagy fejfédőt).
- A homlokra felvitt krémek, olajok, smink és egyéb kozmetikai készítmények befolyásolhatják a mérési eredményt, amely ilyenkor a tényleges testhőmérsékletnél alacsonyabb lehet.
- Homlokmosás után várjon legalább 10 percet, mielőtt megméri a testhőmérsékletet.
- Ne mérjen testhőmérsékletet hegyszöveten, nyílt seben vagy horzsoláson.
- Ne használja a hőmérőt izzadt vagy nedves homlokon.
- Ne mérje meg a testhőmérsékletet szoptatás közben vagy közvetlenül utána.
- Ne használja a hőmérőt kültéren.
- Ne használja a hőmérőt magas hőmérsékletű felületek vagy hőforrások (például kandalló vagy tűzhely) közelében a testhőmérséklet mérésére.
- Az érzékelő ablaka a hőmérő legérzékenyebb része. Ne érintse meg, és ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg.
- A mérés előtt a hőmérőt ugyanabban a helyiségben tárolja, ahol a mérést végzi.
- Ha a hőmérőt a mérés helyétől jelentősen eltérő hőmérsékletű környezetben tárolták, használat előtt legalább 30 percig hagyja a mérés helyszínén, hogy felvegye a környezeti hőmérsékletet.
- Ne használja a készüléket oxigéndús környezetben, illetve olyan helyen, ahol levegővel, oxigénnel vagy dinitrogén-oxiddal kevert gúlékony altatógázok lehetnek jelen.

Használati útmutató

Testhőmérséklet mérése (homlok)

1. Nyomja meg a **Be/Ki** gombot. A hőmérő hangjelzést ad, a kijelző bekapcsol, és rövid időre megjeleníti az összes kijelzési elemet, valamint a háttérvilágítás színeit.
2. Néhány másodperc múlva a készülék ismét hangjelzést ad, jelezve, hogy készen áll a mérésre.
3. Tartsa a hőmérő érzékelőjét a homlok közepére irányítva, **2–3 cm** távolságban, majd nyomja meg a **START** gombot.
4. Ne távolítsa el a hőmérőt a homlokról, amíg a mérés végét jelző hangjelzést nem hallja.
5. A mért érték megjelenik a kijelzőn.

A háttérvilágítás színe a mért hőmérséklettől függ:

- **Zöld:** a készülék mérésre kész, illetve a mért testhőmérséklet **37,3 °C alatt (99,1 °F)** van.
- **Sárga:** a mért testhőmérséklet **37,3 °C és 37,8 °C (99,1–100,0 °F)** között van.
- **Piros:** a mért testhőmérséklet **37,8 °C (100,0 °F) vagy magasabb.**

A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be/Ki** gombot.

A pontos mérési eredmények érdekében két mérés között várjon legalább **3 másodpercet**.

Ha a mérés után megnyomja a **Be/Ki** gombot, a kijelzőn megjelenik az **OFF** felirat, majd a készülék kikapcsol.

Az elemek élettartamának megőrzése érdekében a hőmérő **1 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol.**

Felületi hőmérséklet mérése

1. Bekapcsolt állapotban nyomja meg a **Mód** gombot a **felületi mérési mód** kiválasztásához.
2. Irányítsa az érzékelőt a mérendő tárgy vagy felület közepére **1–2 cm** távolságból.
3. Nyomja meg a **START** gombot.
4. Várja meg a második hangjelzést, és csak ezután távolítsa el a hőmérőt.
5. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a **Be/Ki** gombot.

Memória funkció

A memória funkció testhőmérséklet- és felületi hőmérséklet-mérési módban egyaránt használható.

Amikor a készülék be van kapcsolva és mérésre kész, vagy közvetlenül egy mérés után:

1. Tartsa lenyomva a **Memória** gombot körülbelül **3 másodpercig**.
2. A kijelző jobb oldalán megjelenik az **M** szimbólum.
3. A készülék automatikusan megjeleníti a legutolsó mérést.
4. A **START** gomb ismételt megnyomásával megtekintheti az utolsó **10 mérési eredményt**.

A mérések sorszámozása a következő:

- **1. mérés:** a legutóbbi mérési eredmény
- **10. mérés:** a legrégebbi tárolt mérési eredmény

A memória mind a testhőmérséklet-, mind a tárgyak, felületek és folyadékok hőmérsékletének mérési eredményeit tárolja.

Tisztítás és karbantartás

Az érzékelő ablaka mindig legyen tiszta és száraz, mivel ez elengedhetetlen a pontos mérési eredményekhez.

Az érzékelő ablaka a készülék rendkívül érzékeny része. Tisztításához használjon puha, 75%-os izopropil-alkoholos fertőtlenítő oldattal enyhén megnedvesített kendőt.

- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret.
- Az érzékelő ablak tisztításához az izopropil-alkoholon kívül más vegyszert ne alkalmazzon.
- Tisztítás után várjon legalább **10 percet**, hogy a hőmérő teljesen megszáradjon, mielőtt ismét használná.

A készülék burkolatát és a kijelzőt puha, száraz ruhával tisztítsa.

Figyelem! A hőmérőt ne merítse vízbe vagy más folyadékba.

A hőmérőt tiszta, száraz helyen tárolja, por-, szennyeződés- és egyéb szennyezőanyagoktól védve, valamint közvetlen napfénytől távol.

Az erős elektromágneses mezők befolyásolhatják a hőmérő megfelelő működését.

Amikor a készüléket nem használja, ajánlott az eredeti csomagolásában tárolni.